


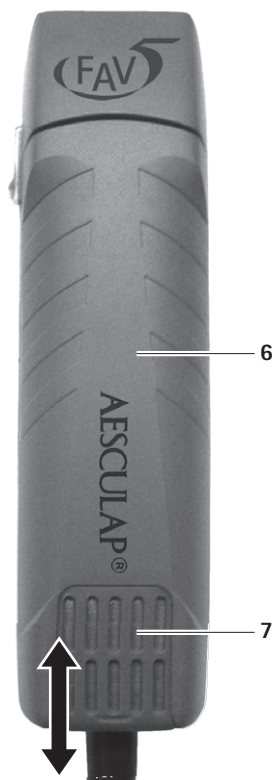
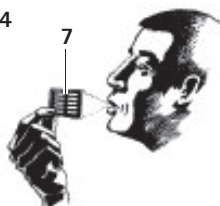


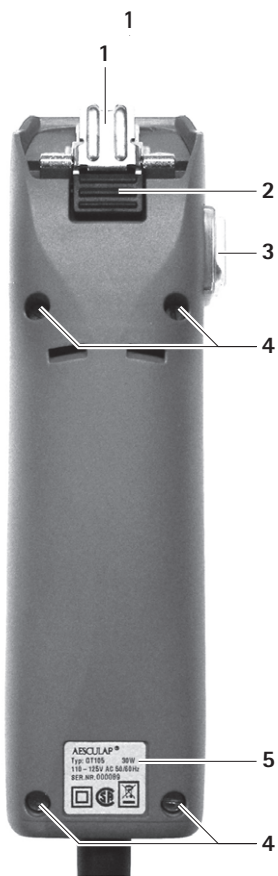

GB

Návod na použitie / technický popis
Clipper FAV5

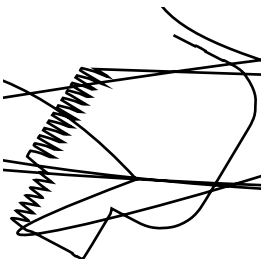

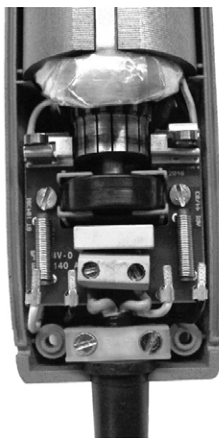

1. Bezpečné pokyny

Nebezpečenstvo smrti zásahom elektrickým prúdom!



- * Neotvárajte výrobok.
- * Produkt pripájajte iba k uzemnenému zdroju napájania.

- Pred použitím skontrolujte funkčnosť výrobku.
- Dodržujte naše „Poznámky k elektromagnetickej kompatibilite (EMC)“.
- Aby sa zabránilo škodám spôsobeným nesprávnym nastavením alebo prvéádzkou a aby nedošlo k ohrozeniu záruk a zodpovednosti výrobcu:
 - Výrobok používajte iba podľa týchto pokynov na použitie.
 - Dodržiavajte bezpečnostné a údržbové pokyny.
 - Pred použitím príslušenstva, ktoré nie je uvedené v návode na použitie, si overte súhlas výrobcu.
- Zaisťte, aby výrobok a jeho príslušenstvo obsluhovali a používali iba osoby s potrebným školením, vedomosťami alebo skúsenosťami na danom mieste.
- Návod na použitie udržiavajte prístupný pre používateľa.
- Vždy dodržiavajte príslušné normy.
- Zaisťte, aby elektrické zariadenia v miestnosti, v ktorej sa prístroj používa, zodpovedali normám IEC.
- Odpojte zariadenie ťahaním za zástrčku, nikdy však nie ťahaním za napájací kábel.
- Nepoužívajte výrobok v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu.
- Nepoužívajte výrobok, ak je poškodený alebo poškodený. Ak je výrobok poškodený, odložte ho.

Poznámka

Toto zariadenie môžu používať deti staršie ako 8 rokov, ako aj osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú na tieto osoby pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní zariadenia, a ak pochopia riziká spojené s používaním zariadenia. Deti sa so zariadením nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmie vykonávať deti bez dozoru. Ak je napájací kábel tohto prístroja poškodený, musí ho vymeniť výrobca, zákaznícka služba alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo akýmkoľvek rizikám alebo rizikám.

2. Popis produktu

2.1 Rozsah dodávky

Označenie	Kat.číslo
Clipper FAV5	GT105G GT105J GT105K GT330 #10 (USA+UK)
Inštrukcie na používanie	TA012748

Poznámka

Strižná hlava GT330 # 10 (USA + UK) pre Clipper FAV5 je súčasťou dodávky. Pre rôzne aplikácie je možné použiť rôzne strižné hlavy (typ SNAP ON)!

2.2 Komponenty potrebné na použitie

- * Clipper FAV5
- * Strižná hlava

Clipper FAV5

2.3 Účel použitia Clipper FAV5

Poznámka

Prístroj je určený výhradne na strihanie zvieracích chlpov. Clipper FAV5 sa používa na strihanie malých zvierat. Clipper FAV5 sa používa s strihacou hlavou, ktorá sa má zvoliť podľa príslušnej aplikácie.

2.4 Princíp činnosti Clipper FAV5

Clipper FAV5 sa zapína (vypína) stlačením vypínača ON / OFF nahor (nadol).

3. Príprava a nastavenie

Nedodržanie týchto pravidiel bude mať za následok úplné vylúčenie zodpovednosti zo strany spoločnosti Aesculap.

- Pri nastavovaní a prevádzke výrobku vždy dodržujte:
 - národné predpisy pre inštaláciu a prevádzku,
 - národné predpisy o ochrane proti požiaru a výbuchu,
 - prevádzkové pokyny podľa predpisov IEC- / VDE.
- Pred pripojením Clipperu k elektrickej sieti sa uistite, či sa napätie uvedené na typovom štítku 5 zhoduje s napätím v sieti.



Nebezpečenstvo

Nebezpečenstvo požiaru a výbuchu!

- **Nepoužívajte výrobok v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu.**



POZOR

Porucha alebo poškodenie produktu spôsobené nesprávnym nastavením!

- * Nevystavujte výrobok priamemu slnečnému žiareniu alebo vlhkosti.
- * Nezakrývajte ventilačné otvory produktu.
- * Zaistite, aby bola sieťová zásuvka použitá na napájanie produktu voľne prístupná.

4. Práca s Clipperom FAV5

4.1 Nastavenie systému

4.1.1 Príslušenstvo

Kombinácie príslušenstva, ktoré nie sú uvedené v tomto návode na použitie, sa môžu použiť, iba ak sú špeciálne určené pre príslušné použitie a ak neohrozujú výkonové a bezpečnostné vlastnosti výrobkov.

- V prípade akýchkoľvek otázok v tejto súvislosti kontaktujte svojho partnera B. Braun / Aesculap alebo technickú službu Aesculap (adresa: pozri kapitolu Technická služba).

4.1.2 Pripojenie strihacej hlavy




Nebezpečenstvo poranenia ostrými doštičkami!

- S nožnicou Clipper FAV5 manipulujte opatrne.


Poznámka

Strižná hlava GT330 # 10 (USA + UK) pre Clipper FAV5 je súčasťou dodávky. Pre rôzne aplikácie sú k dispozícii rôzne strihacie hlavy!

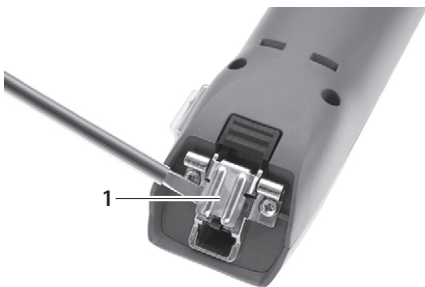

Obr.1

- Ak je záves zatvorený: Otvorte záves 1 pomocou skrutkovača, pozri obrázok 1.

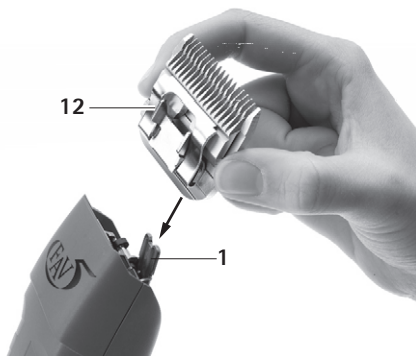

Obr.2

- Nastrihovaciu hlavu 12 namontujte na otvorený záves 1, pozri obr. 2.
- Stlačte vypínač ON / OFF 3.



Obr.3

- Mierne posuňte strihaciu hlavu 12 smerom k Clipper FAV5, pozri obr. 3.
- Strižná hlava 12 zacvakne do svojej polohy.
- Skontrolujte, či je strižná hlava 12 správne usadená na stroji Clipper FAV5.

4.2 Funkčné kontroly Clipper FAV5

- Vykonajte vizuálnu kontrolu.
- Skontrolujte polohu spínača.
- Nainštalujte reznú súpravu správne a prípadne ju namažte, pozri kapitolu Ošetrovanie reznej súpravy.
- Clipper FAV5 pred použitím očistite, pozri kapitolu Čistenie / dezinfekcia.

Clipper FAV5

4.3 Ošetrovanie rezných súprav

4.3.1 Brúsenie rezných dosiek

Poznámka

Ak chcete zaostriť reznú dosku, obráťte sa na technický servis, pozri kapitolu Technický servis.


4.3.2 Výmena strihacej hlavy



Nebezpečenstvo


Nebezpečenstvo poranenia v dôsledku ostrých rezných platní!

- S nožnicou Clipper FAV5 manipulujte opatrne.

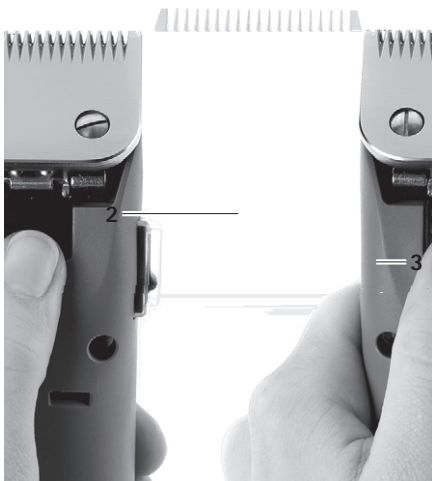

Obr.4

- Stlačením vypínača 3 vypnete Clipper FAV5, pozri obr. 4.
- Stlačte zámok strihacej hlavy 2, pozri obr. 4.

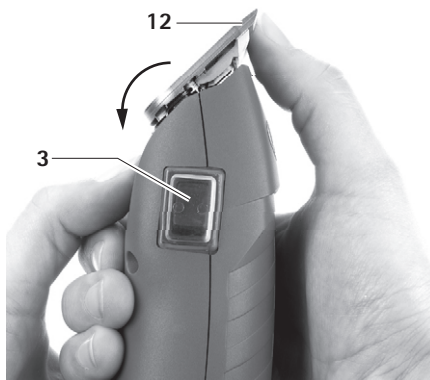

Obr.5

- Stlačte dopredu strihaciu hlavu 12, pozri obr. 5.
- Odpojte strihaciu hlavu 12.
- Vyčistite otvorený pánt 1 štetcom.
- Nainštalujte strihovú hlavu 12 na záves 1.
- Pripojte napájací kábel zariadenia Clipper FAV5.
- Stlačte vypínač ON / OFF 3.
- Mierne posuňte strihaciu hlavu 12 smerom k Clipper FAV5.
- Strižná hlava 12 zacvakne do svojej polohy.
- Skontrolujte, či je strižná hlava 12 správne usadená na stroji Clipper FAV5.

4.3.3 Mazanie strihacej hlavy

- Hornú a dolnú dosku na krájanie očistite mäkkou handričkou alebo kefou. Dbajte na to, aby medzery medzi reznými zubami boli správne vyčistené.
- Horný a dolný rezný tanier mierne namažte špeciálnym mazivom na strihacie hlavy GT604.

5. Spracovanie



POZOR

Poškodenie alebo zničenie produktu spôsobené mechanickým čistením / dezinfekciou alebo sterilizáciou!

- Výrobok čistíte a dezinfikujete iba manuálne.
- Produkt v žiadnom prípade nesterilizujete.

5.1 Čistenie / dezinfekcia

Poznámka

Vždy dodržiavajte pokyny a predpisy týkajúce sa likvidácie a hygieny!

Ručné čistenie / dezinfekcia



Nebezpečenstvo

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom a požiaru!

- Pred čistením jednotku odpojte zo zásuvky.
- Uistite sa, že do produktu nepreniknú žiadne tekutiny.
- Po vyčistení / dezinfekcii nechajte výrobok najmenej 1 minútu vystavený vzduchu.



CAUTION

Poškodenie produktu nesprávnym čistením alebo nevhodnými čistiacimi / dezinfekčnými prostriedkami!

- * Na čistenie povrchu používajte akýkoľvek komerčný čistiaci prostriedok.
- * Nikdy neponárajte výrobok do vody alebo saponátu.
- * Do nabíjачích pozícií nedávajte žiadnu tekutinu.
- * Vyčistíte kontakty v nabíjачích pozíciách, pričom buďte mimoriadne opatrní.

- Plášť produktu utrite handričkou, ktorá nepúšťa vlákna, navlhčenou v komerčnom dezinfekčnom prostriedku na dezinfekciu.
- Ak je to potrebné, po príslušnom čase pôsobenia zotrite zvyšky čistiaceho / dezinfekčného prostriedku handričkou nepúšťajúcou vlákna navlhčenou v čistej vode.
- Produkt osušte čistou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna.
- V prípade potreby opakujte proces čistenia / dezinfekcie.

Čistenie vzduchového filtra

Poznámka

Vzduchový filter sa musí čistiť raz týždenne alebo kedykoľvek je to potrebné!

- * Posuňte dozadu a vyberte vzduchový filter 7.
- * Prefúknite alebo umyte vzduchový filter 7.
- * Zasuňte suchý vzduchový filter 7 do jeho osadenia.

5.2 Kontrola, starostlivosť a inšpekcia

- * Produkt nechajte vychladnúť na izbovú teplotu.
- * Po každom cykle čistenia a dezinfekcie výrobok skontrolujte, či je čistý, funkčný a nepoškodený.
- * Strižnú hlavu podľa potreby namažte, pozri kapitolu Mazanie strihacej hlavy.
- * Skontrolujte, či produkt nie je poškodený, typický hluk z chodu, prehriatie alebo nadmerné vibrácie.
- * Skontrolujte reznú súpravu, či nie je poškodená, poškodená alebo tupá.
- * Ak je výrobok poškodený, odložte ho.

6. Údržba

Aby bola zaistená spoľahlivá prevádzka, spoločnosť Aesculap odporúča vykonávať údržbu výrobku najmenej raz ročne.

Servisné adresy

VETIS Kráľovičové Kračany

Centrálny sklad a sídlo firmy
930 03 Kráľovičové Kračany 91
Tel.: 031/ 55 14 112

Mob: 0918/ 514 112

E-mail: vetis@vetis.sk



7. Zoznam riešení problémov

Porucha	Nájdenie	Príčina	Náprava
Strižná hlava sa nepohybuje	Zaseknutá strihacia hlava	Strižná hlava nie je správne zasunutá do sedadla	Správne zaistíte strižnú hlavu, pozri kapitolu Pripojenie strihacej hlavy
		Vadné vahadlo	Vymeňte vahadlo
Clipper FAV5 strihá zle alebo vôbec	Clipper FAV5 neprerézava	Rezné hrany strihacej hlavy boli otupené	Nechajte výrobok opraviť výrobcom
		Zvieracie chlpy sú príliš mokré	Strihajte iba suché chlpy zvierat
		Strižná hlava nemá strihový tlak	Nechajte výrobok opraviť výrobcom
	Rezný výkon je nedostatočný	Rezné hrany reznej hlavy nie sú správne vybrúsené	Nechajte výrobok opraviť výrobcom
	Prehriatie strihacej hlavy	Nedostatok mazania okrajov strihacej hlavy	Namažte rezné hrany strihacej hlavy, pozri kapitolu Mazanie strihacej hlavy
	Zaseknutá strihacia hlava	Zvieracie chlpy sa zasekli v strihacej hlave	Demontujte strihaciu hlavu a odstráňte zvieraciu srst'
Motor Clipper FAV5 nefunguje	Clipper FAV5 neprerézava	Trosky na elektrických kontaktoch	Vypnite Clipper FAV5 a očistite kontakty
		Porucha motora / elektroniky	Nechajte výrobok opraviť výrobcom
	Vôňa horenia z telesa stroja	Motor spálený	Nechajte výrobok opraviť výrobcom
	Zaseknutá strihacia hlava	Trosky v strihacej hlave	Vyčistite a namažte strižnú hlavu, pozri kapitolu Mazanie strižnej hlavy
Motor Clipper FAV5 beží veľmi pomaly	Atypické zvuky motora	Nedostatok mazania okrajov strihacej hlavy	Namažte rezné hrany strihacej hlavy, pozri kapitolu Mazanie strihacej hlavy

Clipper FAV5

8. Technická služba

Zmeny vykonané na zdravotníckych technických zariadeniach môžu mať za následok stratu záručných / záručných práv a stratu platnosti príslušných licencií.

Servisné adresy

VETIS Kráľovičové Kračany

Centrálny sklad a sídlo firmy
930 03 Kráľovičové Kračany 91
Tel.: 031/ 55 14 112

Mob: 0918/ 514 112

E-mail: vetis@vetis.sk

9. Príslušenstvo / Náhradné diely

Art. no.	Designation
GT604	Lubricant
GT605	Grease
GT104614	Carbon brushes
GT104803	Air filter

Kat.číslo	Označenie
GT105808	Vahadlo
GT105415	Záves (kompletný)

9.1 Strižné hlavy

Strihacia hlava (kompletná)	Veľkosť EU
GT305	0,2 mm
GT310	0,25 mm
GT315	0,5 mm
GT317	0,5 mm
GT320	0,8 mm
GT323	0,8 mm
GT326	1,2 mm
GT330	1,5 mm
GT333	2,0 mm
GT336	2,4 mm
GT339	2,4 mm
GT341	2,8 mm
GT343	3,2 mm
GT345	3,2 mm
GT349	3,2 mm
GT353	2,4 mm
GT357	6,3 mm
GT360	6,3 mm
GT366	9,5 mm

Poznámka

Podrobný popis strihacích hláv nájdete v brožúre V06902.