




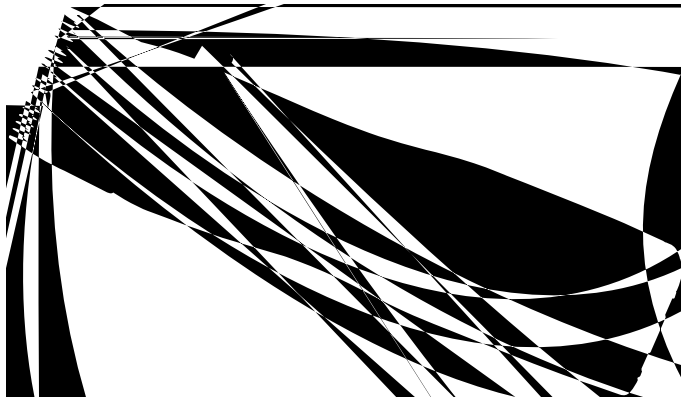

Návod na použitie / Technický popis
Aesculap strihací strojček Favorita CL
Favorita_{CL}/Libra

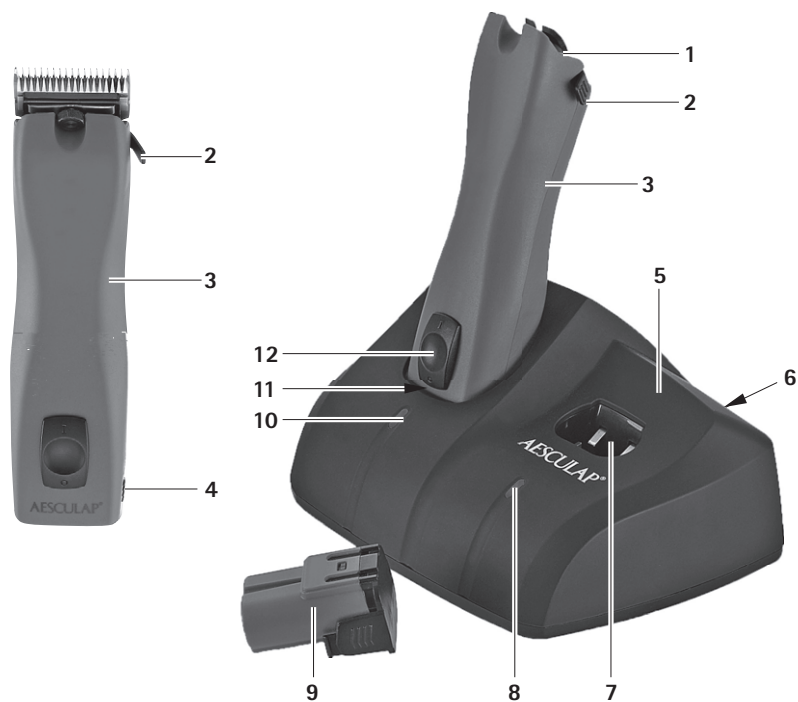

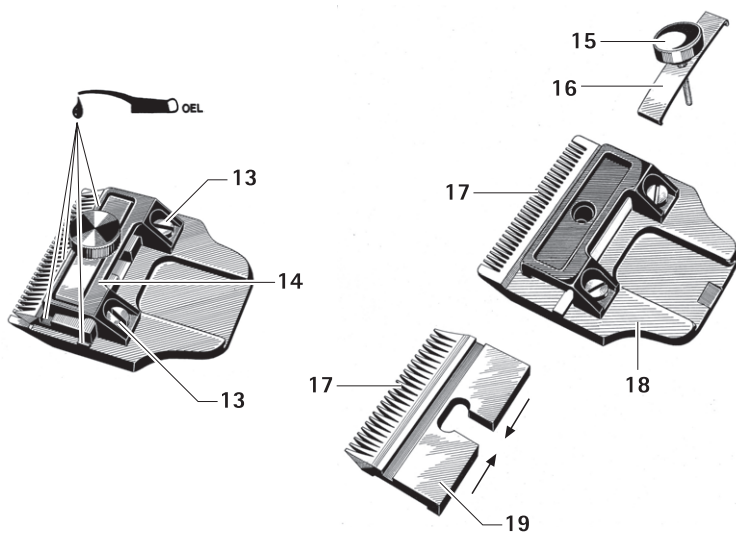

1. Bezpečné pokyny

Nebezpečenstvo smrti zásahom elektrickým prúdom!



Nebezpečenstvo

- **Neotvárajte produkt (s výnimkou výmeny nabíjacej pozície).**
- **Produkt vždy pripájajte k elektrickej sieti iba pomocou uzemňovacieho vodiča zariadenia.**

- Pred použitím skontrolujte správny stav a funkčnosť produktu.
- Nabíjačku a lítium-iónové batérie skladujte pri izbovej teplote.
- Nabíjačku a lítium-iónové batérie udržiavajte v suchu.
- Li-ion batérie pred prvým použitím nabite.
- Dodržujte naše „Poznámky k elektromagnetickej kompatibilite (EMC)“.
- Aby sa zabránilo škodám spôsobeným nesprávnym nastavením alebo prevádzkou a aby nedošlo k zníženiu záruky a zodpovednosti výrobcu:
- Výrobok používajte iba podľa tohto návodu na použitie.

- Dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny a pokyny pre údržbu.
- Pred použitím príslušenstva, ktoré nie je uvedené v návode na použitie, si overte súhlas výrobcu.
- Zaisťte, aby výrobok a jeho príslušenstvo obsluhovali a používali iba osoby s požadovaným vzdelaním, znalosťami alebo skúsenosťami.
- Udržujte návod na použitie prístupný pre používateľa.
- Vždy dodržiavajte príslušné normy.
- Zaisťte, aby elektrické zariadenia v miestnosti, v ktorej sa prístroj používa, zodpovedali normám IEC.
- Odpojte zariadenie ťahaním za zástrčku, nikdy však nie ťahaním za napájací kábel.
- Nepoužívajte výrobok v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu.
- Nepoužívajte výrobok, ak je poškodený. Ak je výrobok poškodený, odložte ho.

Poznámka

Zariadenie môžu používať deti staršie ako 8 rokov, ako aj osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú na tieto osoby pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní prístroja, a ak pochopia riziká spojené s používaním zariadenia.

- Nedovoľte deťom hrať sa so zariadením.
- Nedovoľte, aby deti vykonávali čistenie a údržbu prístroja bez dozoru.

Aesculap strihací strojček Favorita_{CL}/Libra

2. Popis produktu

2.1 Súčasti systému

Označenie	Kat.číslo
Aesculap strihací strojček Favorita _{CL} /Libra	GT200
Aesculap strihací strojček Libra	GT210
Li-ion batéria	GT201
Nabíjačka	GT203
Sieťový napájací kábel (so zástrčkou zariadenia)	pozri kapitolu Príslušenstvo / Náhradné diely
Návod na použitie	TA012167

Poznámka

Batériový strihací stroj Favorita_{CL} / Libra dodávaný bez čepele. Namiesto toho je k dispozícii rad čepeľí pre rôzne aplikácie!

2.2 Komponenty potrebné na použitie

- Batériový strihací stroj Favorita_{CL} / Libra
- Čepeľ
- Nabíjačka
- Sieťový napájací kábel (so zástrčkou zariadenia)
- Li-ion batéria

2.3 Účel použitia strihacieho stroja Favorita CL / Libra na batériu

Poznámka

Prístroj je určený výhradne na strihanie zvieracích chlpcov. Batériový orezávací stroj Favorita_{CL} / Libra sa používa na orezávanie malých zvierat. Batériový strihací stroj Favorita_{CL} / Libra sa musí používať s čepeľou vhodnou pre príslušnú aplikáciu.

2.4 Účel použitia nabíjačky GT203 /

Li-ion batéria GT201

Nabíjačka GT203 sa používa na nabíjanie poháňaný strihací stroj Favorita_{CL} / Libra a lítium-iónová batéria. Pre oboch je k dispozícii po jednej nabíjacej pozícii komponenty.

2.5 Princíp fungovania batérie motorový strihací stroj Favorita_{CL} / Libra

Batériový strihací stroj Favorita_{CL} / Libra sa zapína a vypína posunutím vypínača hore alebo dole, resp.

2.6 Princíp činnosti nabíjačky GT203 / Li-ion batéria GT201

Nabíjačka GT203 je navrhnutá pre rozsah sieťového napätia / frekvencie 100 V až 240 V / 50 Hz až 60 Hz. Aby bola nabíjačka GT203 pripravená na prevádzku, pripojte ju k sieťovému napájaniu tak, že zapojíte sieťovú zástrčku.

Nabíjačka GT203 je vybavená zásuvkami na nabíjanie. Prvá nabíjacia stanica slúži na nabíjanie batérie napájaný strihací stroj FavoritaCL / Libra, zatiaľ čo v druhej nabíjacej pozícii je nabitá lítium-iónová batéria. Každá nabíjacia pozícia má priradené indikačné pole na prednom paneli nabíjačky.

Nabíjanie sa spustí automaticky, akonáhle je do nabíjacej stanice vložená lítium-iónová batéria.

Doba nabíjania v nabíjачích pozíciách závisí od stavu nabitia a kapacity lítium-iónových batérií.

2.6.1 Princíp nabíjania

Lítium-iónové batérie sa nabíjajú impulzní konštantného prúdu.

Počas nabíjania sa sleduje stav nabitia lítium-iónovej batérie. Monitorovanie krivky nabíjania zaisťuje, že batéria je úplne nabitá bez prebívania.

Ďalej sa monitoruje aj teplota batérie a čas nabíjania. Nabíjačka sleduje stav batérie a pomocou dvoch LED indikátorov zobrazuje stav nabitia.

LED indikátory:

zelená = batéria úplne nabitá

červená = Batéria je úplne vybitá

2.6.2 Čas nabíjania

Nabíjanie sa zastaví, akonáhle sa dosiahne maximálna doba nabíjania.

Doba nabíjania je cca. 50 min.

3. Príprava a nastavenie

Nedodržanie týchto pravidiel bude mať za následok úplné vylúčenie zodpovednosti zo strany spoločnosti Aesculap.

- Pri nastavovaní a prevádzke výrobku vždy dodržujte:
- národné predpisy pre inštaláciu a prevádzku,
- národné predpisy o ochrane proti požiaru a výbuchu.
- prevádzkové pokyny podľa predpisov IEC- / VDE.

Nebezpečenstvo požiaru a výbuchu!



Nebezpečenstvo

- **Nepoužívajte výrobok v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu.**



POZOR

Porucha alebo poškodenie produktu spôsobené nesprávnym nastavením!

- **Nevystavujte výrobok priamemu slnečnému žiareniu alebo vlhkosti.**

- * **Nezakrývajte ventilačné otvory produktu.**
- * **Pripojte produkt k uvedenému napätiu 100 V až 240 V / 50 Hz až 60 Hz.**
- * **Zaisťte, aby bola sieťová zásuvka použitá na napájanie produktu voľne prístupná.**

4. Práca so strihacím strojčekom napájaným z batérií FavoritaCL / Libra a nabíjačka GT203 / lítium-iónová batéria GT201

4.1 Nastavenie systému

4.1.1 Pripojenie príslušenstvas

Kombinácie príslušenstva, ktoré nie sú uvedené v tomto návode na použitie, sa môžu použiť, iba ak sú špeciálne určené pre príslušné použitie a ak neohrozujú výkonové a bezpečnostné vlastnosti výrobkov.

- V prípade akýchkoľvek otázok v tejto súvislosti kontaktujte svojho partnera B. Braun / Aesculap alebo technickú službu Aesculap (adresa: pozri kapitolu Technická služba).

4.1.2 Pripevnenie čepele



Nebezpečenstvo

Nebezpečenstvo poranenia ostrými doštičkami!

- Pri manipulácii s čepeľou strihacieho stroja napájaného z batérií a jej obsluhu postupujte opatrne FavoritaCL / Váh.

Poznámka

Batériový orezávací stroj FavoritaCL / Libra sa dodáva bez čepele. Namiesto toho je k dispozícii rad čepeľí pre rôzne aplikácie!

- Posunutím spínača Zap / Vyp 12 smerom hore zapnete orezávací stroj FavoritaCL / Libra 3 napájaný z batérie.
- Páčku 2 stlačte smerom k obalu produktu.
- Namontujte čepeľ na adaptér čepele 1.
- Uvoľnite páčku 2.
- Týmto je upevnenie čepele hotové.

4.1.3 Pripojenie nabíjačky / Nabíjanie

Nebezpečenstvo požiaru v dôsledku skratu pólov akumulátora kvapalinami alebo kovovými komponentmi!



Nebezpečenstvo

- Li-ion batériu neskratujte.

Nebezpečenstvo poranenia a vecných škôd v dôsledku poškodených lítium-iónových batérií!



Nebezpečenstvo

- Pred nabíjaním skontrolujte, či nie sú poškodené lítium-iónové batérie.-
- Poškodené lítium-iónové batérie nepoužívajte ani nenabíjajte.

Strata kapacity / výkonu v dôsledku dlhodobého skladovania vybitých lítium-iónových batérií!



POZOR

- Lítium-iónové batérie skladujte iba v úplne nabitom stave a uložené batérie nabíjajte raz za mesiac.

Po vložení nesprávneho typu batérie do nabíjacej zásuvky dôjde k zničeniu produktu, nabíjacej pozície alebo lítium-iónovej batérie!



POZOR

- Lítium-iónové batérie vkladajte iba do príslušnej nabíjacej pozície.
- Vložte lítium-iónovú batériu do správnej polohy.

Poznámka

Pred nabitím batérie vypnite orezávací stroj FavoritaCL / Libra napájaný z batérie!

Poznámka

Li-ion batérie sa počas nabíjania mierne zahrievajú.

Poznámka

Ak nabíjačku nebudete používať, odpojte sieťovú šnúru od sieťovej zásuvky!

- Pripojenie nabíjačky 5: Zapojte zástrčku zariadenia do zásuvky 6 v nabíjačke 5.
- Zapojte sieťovú zástrčku napájacieho kábla 6 do sieťovej zásuvky.
- Vložte lítium-iónovú batériu 9 do nabíjacej zásuvky 7 nabíjačky 5 a nabite batériu.
 - alebo -
- Vložte strihací strojček FavoritaCL / Libra 3 napájaný z batérie do nabíjacej zásuvky 11 nabíjačky 5 a stroj nabite.
Indikátor stavu nabitia 8 alebo indikátora stavu nabitia 10 sa rozsvieti načerveno.
Po nabití svieti indikátor stavu nabitia 8/10 na zeleno a strihací strojček FavoritaCL / Libra 3 / Li-ion 9 napájaný z batérie je pripravený na prevádzku.

4.2 Kontrola funkčnosti akumulátorového strihacieho stroja FavoritaCL / Libra

- Vykonajte vizuálnu kontrolu.
- Skontrolujte polohu spínača.
- Nainštalujte batériu, pozri kapitolu Výmena lítium-iónovej batérie.
- Nôž namontujte správne a v prípade potreby ho namažte, pozri kapitolu Bezpečné zaobchádzanie: Nôž.
- Nabitú lítium-iónovú batériu majte po ruke, ako rezervu.
- Pred použitím vyčistite strihací stroj FavoritaCL / Libra napájaný z batérie, pozri kapitolu Čistenie / dezinfekcia.

4.3 Funkčné kontroly nabíjačky

- Vykonajte vizuálnu kontrolu.
- Pred pripojením produktu k elektrickej sieti:
 - Skontrolujte sieťový kábel 6, či nie je poškodený.
 - Skontrolujte, či nie je výrobok poškodený (napr. Ohnuté kontakty nabíjacích pozícií).
- Pripojte napájací kábel 6 do zásuvky prístroja nabíjacej stanice.
- Zapojte sieťovú zástrčku do sieťovej zásuvky.
- Vložte lítium-iónovú batériu 9 do nabíjacej zásuvky 7 nabíjačky 5 a nabite batériu.
 - alebo -
- Vložte strihací stroj FavoritaCL / Libra 3 napájaný z batérie do nabíjacej zásuvky 11 nabíjačky 5 a stroj nabite. Indikátor stavu nabitia 8 alebo indikátora stavu nabitia 10 sa rozsvieti načerveno.
Po nabití svieti indikátor stavu nabitia 8/10 na zeleno a strihací stroj FavoritaCL / Libra 3 / Li-ion 9 napájaný z batérie je pripravený na prevádzku.
Produkt je pripravený na prevádzku.

Akumulátorový strihací strojček Favorita_{CL}/Libra

4.4 Bezpečné zaobchádzanie: Čepel'

4.4.5 Výmena lítium-iónovej batérie

4.4.1 Nastavenie tlaku na dosku

Poznámka

Tlak v doske je možné nastaviť tak, aby sa podľa potreby zvýšil rezný výkon (pozri skladaciu stránku)!

- Utlahnite vrúbkovanú skrutku 15 tak, aby sa dalo horným rezným tanierom 19 pohybovať rukou miernym bočným tlakom.

4.4.2 Naostrenie reznej dosky

Poznámka

Ak chcete zaostriť reznú dosku, obráťte sa na technický servis, pozri kapitolu Technický servis.

4.4.3 Demontáž čepele



Nebezpečenstvo


Nebezpečenstvo poranenia v dôsledku ostrých rezných platní!

- Pri manipulácii s nožom napájaným z batérie buďte opatrní

- Uvoľnite vrúbkovanú skrutku 15 s listovou pružinou 16.
- Hornú reznú dosku 19 vytlačte pod prítlačným kusom 14 z čepele. Týmto je demontáž čepele dokončená.

4.4.4 Mazanie čepele

- Demontujte čepeľ, pozri kapitolu Demontáž čepele.
- Hornú reznú dosku 19 a dolnú reznú dosku 18 vyčistite jemným obrúskom alebo kefou. Uistite sa, že medzery v ozubení 17 sú správne vyčistené.
- Hornú reznú dosku 19 a dolnú reznú dosku 18 mierne namažte špeciálnym olejom pre čepele GT604.

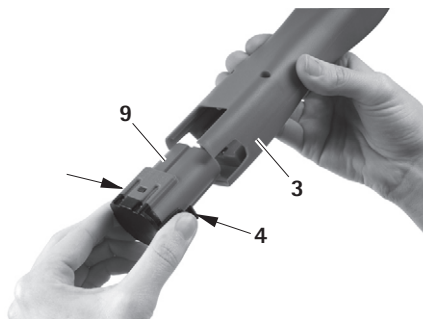

Obr 1.

* Držte orezávací stroj Favorita_{CL} / Libra 3 napájaný z batérie a stlačte poistku odblokovania batérie 4.

- Vytiahnite lítium-iónovú batériu 9 z orezávacieho stroja Favorita_{CL} / Libra 3 napájaného z batérie.
- Vložte nabitú lítium-iónovú batériu 9 do akumulátorového orezávača Favorita_{CL} / Libra 3 až na doraz.
Batériový strihací stroj Favorita_{CL} / Libra 3 je pripravený na prevádzku.

5. Spracovanie



POZOR

Poškodenie alebo zničenie produktu spôsobené mechanickým čistením / dezinfekciou alebo sterilizáciou!

- Výrobok čistite a dezinfikujte iba manuálne.
- Produkt v žiadnom prípade nesterilizujte.

5.1 Čistenie / dezinfekcia

Poznámka

Vždy dodržiavajte pokyny a predpisy týkajúce sa likvidácie a hygieny!

Ručné čistenie / dezinfekcia



Nebezpečenstvo

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom a požiaru!

- **Pred čistením jednotku odpojte zo zásuvky.**
- **Uistite sa, že do produktu nepreniknú žiadne tekutiny.**
- **Po vyčistení / dezinfekcii nechajte výrobok najmenej 1 minútu vystavený vzduchu.**

Poškodenie produktu nesprávnym čistením alebo nevhodnými čistiacimi / dezinfekčnými prostriedkami!



POZOR

- **Na čistenie povrchu používajte akýkoľvek komerčný čistiaci prostriedok.**
- **Produkt nikdy neponárajte do vody alebo saponátu.**
- **Do nabíjacích pozícií nedávajte žiadnu tekutinu.**
- **Vyčistite kontakty v nabíjacích pozíciách, pričom buďte mimoriadne opatrní.**
- Plášť produktu utrite handričkou, ktorá nepúšťa vlákna, navlhčenou v komerčnom dezinfekčnom prostriedku na dezinfekciu.
- Ak je to potrebné, po príslušnom čase pôsobenia zotrite zvyšky čistiaceho / dezinfekčného prostriedku handričkou nepúšťajúcou vlákna navlhčenou v čistej vode.
- Produkt osušte čistou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna.
- Kontakty v nabíjacej stanici vyčistite izopropanolom alebo etylalkoholom a vatovým tampónom. Nepoužívajte žieravé chemikálie.
- V prípade potreby opakujte proces čistenia / dezinfekcie.

Akumulátorový strihací strojček FavoritaCL/Libra

5.2 Kontrola, starostlivosť a inšpekcia

- Produkt nechajte vychladnúť na izbovú teplotu.
- Po každom cykle čistenia a dezinfekcie výrobok skontrolujte, či je čistý, funkčný a nepoškodený.
- Namažte čepeľ podľa potreby, pozri kapitolu Mazanie čepele.
- Ak chcete zvýšiť rezný výkon, podľa potreby upravte tlak na dosku, pozri kapitolu Úprava tlaku v doske.
- Skontrolujte, či produkt nie je poškodený, typický hluk z chodu, prehriatie alebo nadmerné vibrácie.
- Skontrolujte, či nôž nie je zlomený, poškodený alebo tupý.
- Ak je výrobok poškodený, odložte ho.

6. Údržba

Pre zaistenie spoľahlivej prevádzky spoločnosť Aesculap odporúča vykonávať údržbu výrobku najmenej raz ročne.

Servisné adresy

VETIS Kráľovičové Kračany

Centrálny sklad a sídlo firmy
930 03 Kráľovičové Kračany 91
Tel.: 031/ 55 14 112

Mob: 0918/ 514 112

E-mail: vetis@vetis.sk



7. Zoznam riešení problémov

7.1 Orezávací stroj na batérie FavoritaCL / Libra

Porucha	Hľadanie	Príčina	Opatrenie
Orezávací stroj na batériu FavoritaCL / Váhy sa nespúšťajú	Skontrolujte polohu spínača	Li-ion batéria nie je nabitá	Nabite lítium-iónovú batériu
	–	Li-ion batéria je poškodená	Vložte novú lítium-iónovú batériu
	–	Nie je vložená lítium-iónová batéria	Vložte novú lítium-iónovú batériu
Orezávací stroj na batériu FavoritaCL / Libra prestane bežať	–	Li-ion batéria deaktivovaná ochranným obvodom	Vypnite a znova zapnite stroj
	–	Lítium-iónová batéria úplne vybitá	Vložte novú lítium-iónovú batériu
Orezávací stroj na batériu FavoritaCL / Libra sa v nabíjacej stanici nenabíja	LED indikátory zostávajú tmavé	–	pozri kapitolu Nabíjačka a lítium-iónová batéria

7.2 Nabíjačka a lítium-iónová batéria

Porucha	Hľadanie	Príčina	Opatrenie
Nabíjačka nefunguje	LED indikátory zostávajú tmavé	Napájací kábel nie je zapojený	Zapojte sieťový šnúru do zásuvky prístroja na nabíjačke a do sieťovej zásuvky
		Chybný napájací kábel	Vymeňte sieťový šnúru
	Li-ion batéria nie je nabitá	Vadná nabíjačka	Nechajte výrobok opraviť výrobcom

Akumulátorový strihací strojček FavoritaCL/Libra

Porucha	Hľadanie	Príčina	Opatrenie
Li-ion batéria nie je nabitá	Li-ion batéria je vložená správne, indikátor stavu nabitia zostáva tmavý	Kontakty nabíjačky sú znečistené alebo poškodené	Vyčistite kontakty v nabíjacej pozícii, pozri kapitolu Čistenie / dezinfekcia, alebo nechajte nabíjačku opraviť výrobcom
		Li-ion batéria je poškodená	Nechajte lítium-iónovú batériu opraviť výrobcom
		Vadná nabíjačka	Nabíjačku dajte opraviť výrobcom
		Počas nabíjania bola zistená nadmerná teplota v lítium-iónovej batérii	Vyberte Li-ion batériu z nabíjacej pozície, nechajte ju vychladnúť a začnite nabíjať. Ak sa porucha opakuje, nechajte batériu opraviť výrobcom
		Porucha nabíjania alebo poškodená lítium-iónová batéria	Vyberte lítium-iónovú batériu z nabíjacej pozície a nabíjanie opakujte, ak je to potrebné, v inej nabíjacej pozícii. Ak sa porucha vyskytne znovu, nechajte lítium-iónovú batériu opraviť výrobcom

Akumulátorový strihací strojček FavoritaCL/Libra

9. Príslušenstvo / Náhradné diely

Kat.číslo	Verzia	Napájací kábel	Li-ion batéria	Nabíjacia stanica	Orezávací stroj na batériu	Príslušenstvo
GT206	Europe okrem UK	TA012170 Európsky plochý konektor, čierny, L = 1,8 m	GT201	GT200880	GT200 rozbalený	GT604800 Ručná olejníčka
GT206G	UK	TA012169 UK zástrčka, čierna, L = 1,8 m	GT201	GT200880	GT200 rozbalený	GT604800 Ručná olejníčka
GT206J	Japan, Mexico 110–125 V	TA012168 2-pólová zástrčka zariadenia, čierna, L = 1,8 m	GT201	GT200880	GT200 rozbalený	GT604800 Ručná olejníčka
GT206K	USA	TA012168 2-pólová zástrčka zariadenia, čierna, L = 1,8 m	GT201	GT200880	GT200 rozbalený	GT604800 Ručná olejníčka
GT206AR	Argentina	TA012333	GT201	GT200880	GT200 rozbalený	GT604800 Ručná olejníčka
GT216	Europe okrem UK	TA012170 Európsky plochý konektor, čierny, L = 1,8 m	GT201	GT200880	GT210 rozbalený	GT604800 Ručná olejníčka

10. Technické špecifikácie

10.1 Orezávací stroj na batérie FavoritaCL / Libra

Model	GT216
Rýchlosť zdvihu	2 300 1/min
Nabíjacie / výstupné napätie	max. 8.4 V
Nabíjací / výstupný prúd	max. 1.2 A
Hmotnosť (bez čepele)	400 g
Klasifikácia podľa k smernici 93/42 / EHS	II
EN 60335-1, EN 60335-2-29	

10.2 Nabíjačka

Model	GT203
Rozsahy sieťového napätia (prúdový odber)	100-240 V
Frekvencia striedavého prúdu	50-60 Hz
Nabíjacie / výstupné napätie	max. 8.4 V
Nabíjací / výstupný prúd	max. 1.2 A
Hmotnosť	495 g
Klasifikácia podľa k smernici 93/42 / EHS	II
Schvaľovacie značky	CE, UL

10,3 lítium-iónová batéria

Model	GT201
Typ bunky	Li
Jednosmerné napätie	7.4 V
Kapacita nabíjania	approx. 1.2 Ah
Doba nabíjania	50 min ±5 min

10.4 Vyhlásenie o zhode

	Prehlasujeme na našu vlastnú zodpovednosť, že tento produkt vyhovuje nasledujúcim štandardom alebo iným normatívnym dokumentom: Pokyny 2004/108 / ES o EMC: DIN EN 60335-1 DIN EN 60335-2-8 Bezpečnosť domáчих a podobných elektrických spotrebičov
	- všeobecné požiadavky - pre strojčeky na strihanie vlasov Aesculap Suhl GmbH

11. Likvidácia

Elektrické náradie, príslušenstvo a obaly by sa mali recyklovať ekologickými postupmi.

11.1 Iba pre krajiny EÚ

 	Elektrické náradie nevyhadzujte do domového odpadu! Podľa európskej smernice 2012/19 / EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení a jej implementácie do vnútroštátnych právnych predpisov sa elektrické náradie, ktoré skončilo svoju životnosť, musí zbierať osobitne a recyklovať pomocou procesov priateľských k životnému prostrediu.
--	---

11.2 Li-ion batérie

Batérie nevyhadzujte do domového odpadu a nehádzte ich do ohňa alebo vody. Chybné alebo vybité batérie sa musia zhromažďovať a recyklovať alebo zlikvidovať ekologicky kompatibilnými spôsobmi podľa smernice 2006/66 / ES.

12. 2-ročná záruka

Vážený zákazník,

Ďakujeme, že ste si vybrali produkt od našej spoločnosti. Názov Aesculap po celé desaťročia predstavuje osvedčenú kvalitu a prvotriedne služby. Je známe, že zákazníkom poskytujeme inovatívne a vysoko výkonné produkty. Aesculap vyrába vysokokvalitné zariadenia s použitím vysoko kvalitných materiálov a starostlivých výrobných postupov. Chceli by sme vás upozorniť, že nezodpovedáme za chyby na našich výrobkoch, ak sú spôsobené nesprávnym používaním, bežným opotrebením alebo nesprávnym používaním výrobku alebo ak sú k dispozícii nevhodné alebo nesprávne fungujúce výrobky tretích strán. použité. Diely, ktoré sú obvykle opotrebované, a za ktoré preto nenesieme zodpovednosť, sú batéria a hlava strojčka. Z našej záruky sú vylúčené aj chyby, ktoré neovplyvňujú alebo len zanedbateľne ovplyvňujú hodnotu alebo funkciu produktu.

Ak ručíme za záruku, vyhradzuje si právo výrobok opraviť alebo vymeniť.